


PROTHÈSE scellée

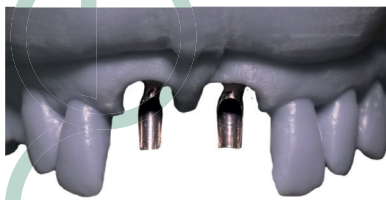

Avec cette solution, vous avez le **choix de l'accastillage et de la prothèse pour davantage de facilité dans votre pratique selon les cas cliniques !**

De l'unitaire au bridge, la prothèse est scellée sur un pilier standard en titane quelle que soit la marque du système implantaire ou sur un **pilier personnalisé titane ou hybride** (embase titane/pilier zircone).

La solution scellée présente l'avantage de pouvoir traiter aisément les cas antérieurs avec des axes implantaires vestibulés.



ESTHÉTIQUE

Grand choix et/ou personnalisation de la teinte des dents.



PRÉCISION

Facilité de gestion des cas d'axes divergents sur les dents adjacentes.

INDICATIONS	Couronnes unitaires antérieures ou postérieures. Bridges de faible et grande portée. Personnalisation selon schéma de teinte ou photos. Teinte : disponible en Vita Classical, Vita 3D Master, Ivoclar Chromascop		
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes numériques (avec scanbody) Empreintes physico-chimiques (avec transfert)		
MÉTHODE	La planification prothétique est réalisée au laboratoire sur le modèle en plâtre ou sur l'empreinte numérique, par un choix de connectique adaptée selon la hauteur gingivale, l'angulation, etc. Les éventuelles reconstitutions de gencive peuvent être réalisées en céramique ou en composite, pour une intégration fonctionnelle et esthétique optimale. Si cela est nécessaire, le pilier catalogue est adapté par nos prothésistes (hauteur, marquage anti-rotationnel, axe d'insertion, etc.)		
MATÉRIAUX	Mogucera CoCr	Katana html, katana yml	IPS Style Ceram Emax Ceram
FOURNISSEUR	Scheftner (Allemagne)	Kuraray noritake (Allemagne)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0482/NF EN ISO 22674	CE 0120/NF EN ISO 6872	CE 0123/NF EN ISO 6872-9693
DÉLAIS DE LIVRAISON	4 jours laboratoire		